


## Wundbeispiele

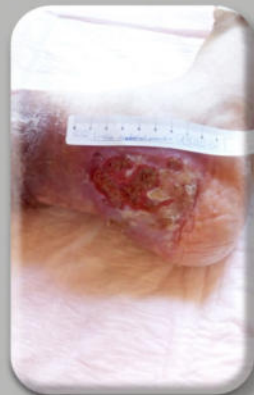

ahc-Superabsorber 10 x 10cm, 10 Stk.	PZN: 17548630
ahc-Superabsorber 10 x 10cm, 60 Stk	PZN: 17548647
ahc-Superabsorber 10 x 20cm, 10 Stk	PZN: 17548653
ahc-Superabsorber 10 x 20cm, 60 Stk	PZN: 17548676
ahc-Superabsorber 20 x 20cm, 10 Stk	PZN: 17548682
ahc-Superabsorber 20 x 20cm, 30 Stk	PZN: 17548699
ahc-Superabsorber 20 x 30cm, 10 Stk	PZN: 17548707
ahc-Superabsorber 20 x 30cm, 30 Stk	PZN: 17548713
<hr/>	
ahc-compression 10cm x 6 Sets	PZN: 15306756
<hr/>	
ahc-Sensitive 8 x 10cm, 12 Stück	PZN: 16774560
ahc-Sensitive 8 x 10cm, 60 Stück	PZN: 16774577
ahc-Sensitive 10 x 15cm, 12 Stück	PZN: 16774583
ahc-Sensitive 10 x 15cm, 60 Stück	PZN: 16774608
ahc-Sensitive 20 x 30cm, 6 Stück	PZN: 16774614
ahc-Sensitive 20 x 30cm, 30 Stück	PZN: 16774620
<hr/>	
ahc-Hydrogel 225ml	PZN: 14033871
ahc-Hydrogel 150ml	PZN: 14033859
ahc-Hydrogel 75ml	PZN: 14033842

**AKANNI**  
Healthcare GmbH  
97346 Iphofen, Krassolzheimer Straße 47

Tel: +49(0)9326 / 97898-50

Fax: +49(0)9326 / 97898-51

Email: [vertrieb@akanni.de](mailto:vertrieb@akanni.de)


Web: [www.akanni.de](http://www.akanni.de)



# Die fantastischen

# 4

## ahc-Superabsorber

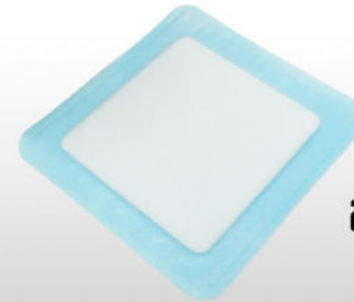

### ahc-compression



## ahc-Sensitive



## ahc-Hydrogel<sup>90</sup>



# AKANNI

[www.akanni.de](http://www.akanni.de)

UNSERE BEGEGNUNG IST EINE BEREICHERUNG



- ▷ Bestehend aus einem **superabsorbierenden Saugkern**
- ▷ Exsudat wird **aufgenommen** und **eingebunden**
- ▷ Hält das Exsudat auch **unter Druck** (z.B. unter einer Kompressionstherapie mit **ahc-compression**)
- ▷ Perforierte **Wundkontaktschicht** (weiß) auf die Wunde legen
- ▷ Vlies-Rückenschicht (blau) **verhindert** das **Austreten** von Exsudat (Wäscheschutz)
- ▷ Tragedauer bis **7 Tage**
- ▷ Der ahc-Superabsorber ist in **4 Größen** erhältlich
- ▷ Darf **nicht zu- oder zerschnitten** werden





# ahc-Superabsorber


Bedecken & Aufsaugen



4 Größen

- 10cm x 10cm
- 10cm x 20cm
- 20cm x 20cm
- 20cm x 30cm

- ▷ steriler, **superabsorbierender** Wundverband
- ▷ für **stark** und **übermäßig** exsudierende Wunden
- ▷ Verband **bedeckt** und **schützt** das Wundareal
- ▷ Reduziert das Risiko von **Mazerationen**
- ▷ Eine perforierte Wundkontaktschicht **verhindert** das **Verkleben** mit der Wunde
- ▷ Ein optimales **feuchtes Wundmilieu** bleibt erhalten

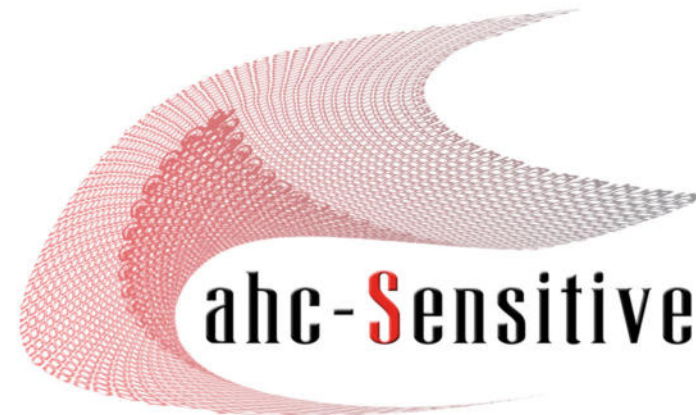

Bedecken & Schützen



- ▷ perforiertes, sanft anhaftendes **Wunddistanzgitter**
- ▷ weiches **Vlies**, beidseits mit **Silikon** beschichtet
- ▷ leitet Exsudat ab und **schont** die Wundumgebung
- ▷ ahc-Sensitive **bedeckt** und **schützt** die Wunde
- ▷ Tragedauer bis zu **7 Tage**, reizarm und latexfrei
- ▷ ermöglicht **atraumatische** Verbandwechsel



# ahc-compression

2-Komponenten-Kompressionssystem

Kompression



NEU  
Jetzt mit  
Indikator

- ▷ jetzt mit **Indikator** für einfaches Anlegen
- ▷ Kombination aus **Kurz-** und **Langzug**
- ▷ **2 kohäsive Lagen** (Anti-Rutsch-Effekt)
- ▷ Universalgröße von **18cm bis 32cm**
- ▷ **Einfache** Anwendung (Dehnungsbegrenzung)
- ▷ Angenehmer **Tragekomfort**
- ▷ extrem **dünn, hautfreundlich** und **latexfrei**



# ahc-Hydrogel<sup>90</sup>

Befeuchten



- ▷ **Sprühgel** zur einfachen Anwendung
- ▷ der Schutzfilm **bedeckt** und hält die Wunde **feucht**
- ▷ dringt in **entlegenste** Wundbereiche (Untermierungen)
- ▷ ahc-Hydrogel wirkt wundheilungsfördernd
- ▷ **keine** Einschränkung in der Anwendungsdauer
- ▷ Anwendung bis **90 Tage** nach Anbruch

